


## Pince de Pozzi à usage unique, réf. 100QQB et 100QRB

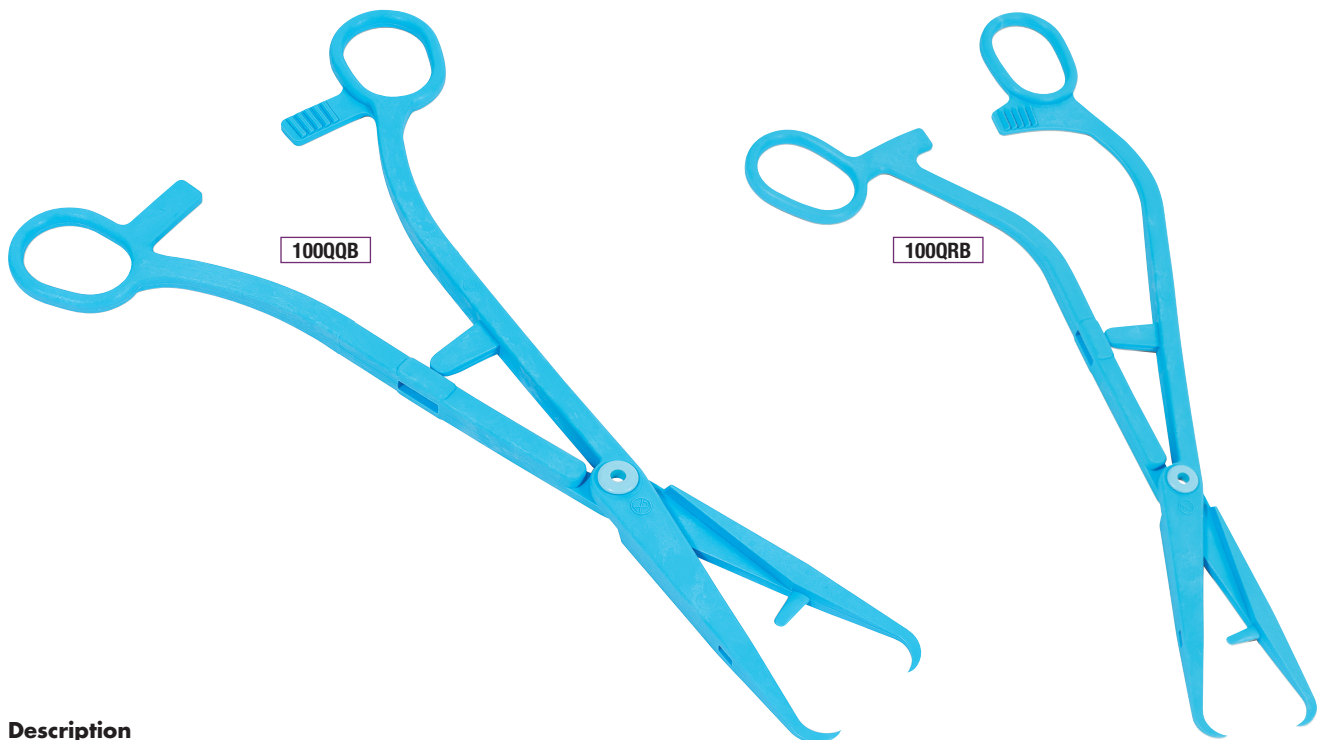

### Description

- La pince de Pozzi est un dispositif médical à usage unique.
- Elle est utilisée en gynécologie lors de la pose d'un stérilet ou de tout autre acte médical dans la cavité utérine (biopsie, cerclage, etc.).
- Les extrémités pointues servent pour la fixation et la traction du col de l'utérus.
- La pince de Pozzi se présente sous la forme de ciseaux pour faciliter la prise en main.

### Caractéristiques techniques

- **Matériau** : pince biocompatible en polyamide.
- **Type de dispositif** : dispositif médical à usage unique stérilisé.
- **Stérilisation** : à l'oxyde d'éthylène.
- **Modèles** : - Réf. **100QQB** : forme droite ;  
- Réf. **100QRB** : forme coudée.
- **Dimension** : longueur de 25 cm.
- **Conditionnement** : sous sachet individuel, en lot de 20.