


Cardio First Angel, réf. 100HEA

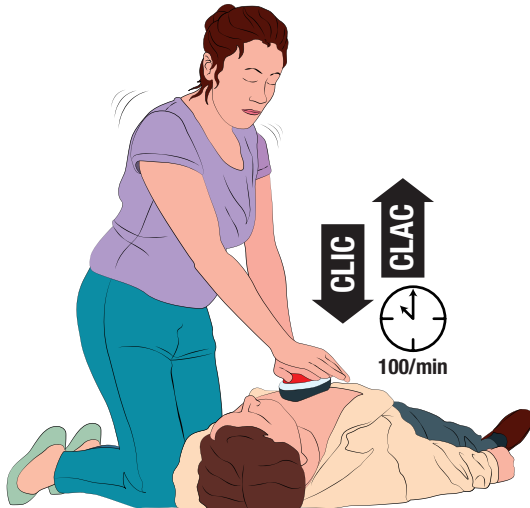

Description

- Le Cardio First Angel est un boîtier d'aide à la réanimation cardio-pulmonaire (RCP).
- Il s'utilise en complément d'un défibrillateur face à une victime d'un arrêt cardiaque.
- Il aide à réaliser un massage cardiaque précis et efficace.
- Localisation précise et rapide de l'endroit du massage cardiaque et aide à positionner les mains.
- Maîtrise de la pression exercée sur le thorax de la victime grâce à un indicateur sonore se traduisant par un « clic - clac ».
- Il permet également au sauveteur d'atteindre rapidement la fréquence optimale de massage qui est de 100 compressions par minute.
- Le sauveteur est guidé au niveau de l'intensité et du rythme des compressions en attendant l'arrivée des secours.
- Il permet d'éviter tout contact direct entre le sauveteur et le patient mais aussi de rassurer le secouriste novice.
- Entièrement mécanique, il ne nécessite pas d'alimentation.

Caractéristiques techniques

- **Equipements** : livré avec une boîte de protection.
- **Fréquence optimale** : 100 compressions par minute.
- **Dimensions** : Lø 16 x la 11 x H 5 cm.
- **Poids** : 140 g.