


Divan d'examen électrique 2 plans Roye Vog médical

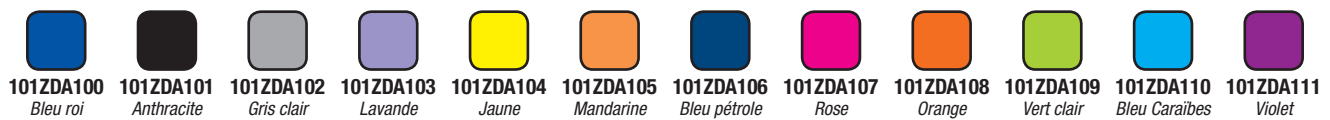

Description

- Divan d'examen électrique à hauteur variable en actionnant une pédale avec le pied.
- Encombrement minimal grâce à la structure en ciseaux qui élève le divan à la verticale de manière droite et non en diagonale.
- Divan d'examen robuste d'une grande capacité de charge afin de pouvoir ausculter les patients à forte corpulence.
- Réglage simple de l'inclinaison du dossier pour ausculter le patient en position allongée ou semi-assise.
- Facile à nettoyer et à désinfecter.
- Plusieurs coloris au choix, à préciser lors de la commande.
- Idéal en cabinet médical et instituts de soins et d'esthétique.

Caractéristiques techniques

- **Equipements :** - Table électrique à hauteur variable de 560 à 960 mm ;
- Dossier réglable par vérin à gaz à commande bilatérale ;
- Sellerie cousue, remplie d'une mousse de densité 28 kg/m³ pour le confort du patient et cousue pour une solidité optimale ;
- Porte-rouleau pour drap d'examen d'une largeur de 50 cm ;
- Carter de protection sur le piètement afin de le protéger des frottements et des coups ;
- Equipé de 4 patins noirs réglables en polyamide ;
- Commande au pied ;
- Moteur de Classe II.
- **Matériaux :** bâti en tube rectangulaire époxy blanc.
- **Dimensions :** - Divan complet : Lo 2000 x la 670 x H 560/960 mm ;
- Dossier : Lo 600 x la 670 x Ep. 40 mm ; Assise : Lo 1350 x la 670 x Ep. 40 mm.
- **Poids du divan :** 80 kg.
- **Capacité de charge :** capacité maximale de 220 kg.
- **Conformité :** classement au feu M1.
- **Garantie :** 3 ans, hors sellerie.
- **Lieu de fabrication :** mobilier médical de fabrication française.

Options sur demande (nous consulter)

- Trou visage.
- Barrières rabattables.
- Roulettes escamotables de Ø 80 mm.
- Jeu de 4 roulettes (Ø 100 mm à frein).
- Paire de douilles coulissantes pour étriers.
- Paire d'étriers en mousse polyuréthane noir.
- Paire d'étriers inox.
- Paire d'étriers en PU avec système de rotules.
- Commande périphérique réglage en hauteur.
- Dos électrique (commande manuelle).
- Batterie autonome.
- Paire de douilles pour porte sérum.
- Tige porte sérum, 2 crochets simples.
- Coussin semi-cylindrique largeur 600 mm (pour divan 670 mm).
- Protection PVC cristal transparent.
- Rail + douille coulissante (la paire) pour porte sérum/appui-bras.
- Commande manuelle 2 touches (à la place de la commande au pied).
- Livraison et installation du divan.