


Poche à urine avec valve non stérile 2 L, réf. 105RNA100



- ✓ Sondage urinaire de courte durée
- ✓ Vidange facilitée par le système de robinet en croix
- ✓ Valve anti-retour

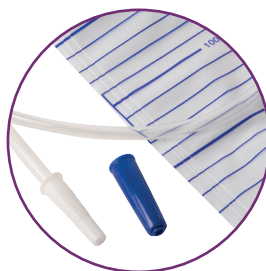

Description

- Le collecteur d'urine Colvax assure le drainage vésical en cas de rétention urinaire.
- Sa connexion s'adapte à toutes les sondes urinaires éliminant tout risque d'incompatibilité.
- La valve anti-reflux empêche le retour d'urine, évitant des complications rénales.
- Le robinet en croix permet une manipulation facile d'une main pour l'évacuation.
- Ses œillets de fixation sont renforcés pour tous types de crochets.



Indications d'utilisation

- Indiqué pour les drainages urinaires de courte durée (maximum 24h ou selon le protocole défini)



Caractéristiques techniques

- **Composition** : - Poche, tubulure, embout : en PVC ;
- Capuchon : en polyéthylène ;
- Sans latex, BPA ;
- Aucun élément d'origine animale ou végétale.
- **Type de dispositif** : dispositif médical de classe I non stérile (organisme notifié DM : NA).
- **Capacité** : 2 litres.
- **Durée de validité** : 3 ans.
- **Conformité** : Sur chaque conditionnement primaire et secondaire, pour les dispositifs médicaux, sont inscrits le numéro de lot, le mode de stérilisation éventuel, la date de péremption et/ou de fabrication et les symboles utilisés en accord avec la norme NF EN 15223-1.



Informations réglementaires

- **EMDN** : T01020204.
- **Directive(s) - règlement(s) européen(s)** : 2007/47/CEE.
- **Normes associées** :
NF EN ISO 15223-1 : DM -Symboles à utiliser avec les étiquettes, l'étiquetage et les informations relatifs aux dispositifs médicaux ;
NF EN ISO 8669-2 : Poches de recueil d'urine - Partie 2 : Prescriptions et méthodes d'essai.
- **Fabricant** : DIDACTIC
- **Nomenclature douane** : 39232990.
- **Conditions de stockage et de transport** : A l'abri de la lumière, de l'humidité et de la chaleur.

Date de révision : 01/02/2024