


## Chaise d'évacuation standard 4000, réf. 307ZDA140



- ✓ Opérateur unique jusqu'à 200 kg
- ✓ Facile à ouvrir, prête à l'emploi en quelques secondes
- ✓ Solution rapide pour une évacuation sécurisée
- ✓ Simple d'utilisation
- ✓ Structure légère
- ✓ Mouvement et manipulation requis minimum
- ✓ Pliable pour un stockage facile
- ✓ Matériaux ignifugés
- ✓ Montage mural
- ✓ Entretien minimal

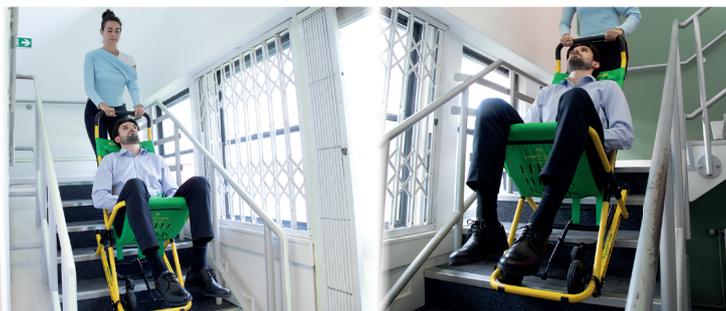

### Description

- Elle permet une évacuation d'urgence rapide, facile et sûre.
- Elle permet à des opérateurs de petite stature de transporter des personnes plus imposantes qu'eux.



### Caractéristiques techniques

- **Equipements :** - Harnais passager 4 points ;  
- Appui-tête matelassé ;  
- Siège rembourré réglable ;  
- Signalisation d'orientation ;  
- Crochets de fixation murale ;  
- Housse de protection ;  
- Guide d'utilisation.
- **Dimensions :** H 124 x L 57 x P 26,5 cm.
- **Poids :** 11,5 kg.
- **Capacité de charge :** 200 kg.
- **Garantie :** 15 ans.



### Avantages des équipements

- **Pistes de freinage automatique réglables :** des pistes ajustables renforcées permettent de contrôler la vitesse de descente.
- **Poignée anti-dérapante réglable en hauteur :** pour un déploiement et une utilisation faciles, avec un stockage compact.
- **Appui-tête avec courroie d'immobilisation :** limite les mouvements et sécurise la personne transportée.
- **Harnais de sécurité à relâchement rapide 4 points :** pour améliorer le confort de la personne transportée.
- **Roues avant très résistantes :** pour une meilleure utilisation sur terrain accidenté.
- **Roues pivotantes verrouillables industrielles :** pour les situations où la chaise doit rester fixe
- **Étiquettes d'orientation :** pour une localisation simple en cas d'urgence.
- **Position du siège réglable :** permet une position assise idéale, en mode siège ou hamac.

Date de révision : 13/03/2024